

People have Priority



Prophylaxie et parodontologie



Prophylaxie et parodontologie

L'entreprise	4 – 5
Synoptique détartreur piézoélectrique	6 – 7
Synoptiques détartreur à air, pièces à main et contre-angles	8 – 9
Détartreur piézoélectrique Tigon+	10 – 11
Détartreur piézoélectrique Tigon	12 – 13
Inserts piézo	14 – 15
Pièces à main et contre-angles Proxeo	16 – 17
Détartreur à air Proxeo	18 – 19
Caractéristiques techniques	20 – 21



W&H Dentalwerk
Bürmoos



W&H Sterilization
Brusaporto



L'enjeu est important. Car l'Homme est important.

L'action préventive est la garantie d'un développement sain. Ce principe qui vaut pour la prophylaxie et la parodontologie, vaut également pour W&H : en effet, c'est dans ce sens que notre entreprise familiale agit depuis plusieurs générations.

Le secret de notre succès : depuis toujours, W&H place l'individu, qu'il soit partenaire, client ou membre du personnel, au centre de ses préoccupations.

La critique étant humaine, il serait bien normal que vous demandiez : « Ce principe est-il vraiment appliqué ? »
Ce à quoi nous répondons : « Mettez-nous à l'épreuve ! »

People
have
Priority

W&H en bref

- > Siège social en Autriche
- > 1000 employés dans le monde
- > 80 équipes
- > Fondée en 1890 à Berlin par Jean Weber et Hugo Hampel
- > 3 sites de production
- > 19 filiales en Europe et en Asie
- > Part exportation supérieure à 95 %

Plus d'informations sur
wh.com

PEOPLE HAVE PRIORITY



En toute situation...

Avec les appareils de prophylaxie et parodontologie W&H, vous ferez face à l'imprévu.



« Nous pouvons aujourd'hui garantir à nos patients un détartrage sans douleur. »

Dr. Jure Robic,
Dentiste, Slovénie



« Du point de vue technologique, Tigon est parfait – Résultat : moins de stress pour le patient et moins de fatigue pour le praticien. »

Babette McLaren-Thomson,
Assistante dentaire, Allemagne

Les avantages en un clin d'œil

- > Liquide tempéré pour le bien-être du patient
- > Gamme d'inserts parfaitement adaptés
- > Pièce à main avec anneau de lumière à 5 LED
- > Grand écran lisible
- > Menu intuitif
- > Commande au pied multifonction
- > Réservoir thermodésinfectable et stérilisable
- > Pièce à main thermodésinfectable et stérilisable

Détartreur piézoélectrique Tigon+



Plus d'informations
page 10

Les avantages en un clin d'œil

- > Utilisation aisée
- > Pièce à main avec anneau de lumière à 5 LED
- > Réservoir du liquide de refroidissement de 400 ml
- > Gamme d'inserts parfaitement adaptés
- > Plateau démontable et stérilisable
- > Support de pièce à main orientable et démontable
- > Composants électroniques de pointe
- > Pièce à main thermodésinfectable et stérilisable

Détartreur piézoélectrique Tigon



Plus
d'informations
page 12



« J'utilise uniquement les produits W&H Proxeo. Ils ont une taille idéale et leur surface est agréable. »

Lolita Jadermark,
Hygiéniste dentaire, Suède



« Un détartreur à ultrasons pratique et performant qui convient à de nombreuses applications parodontales. »

OA Dr. Christian Graetz,
Chirurgien-dentiste dans une clinique universitaire, Allemagne

Les avantages en un clin d'œil

- > Longévité grâce à des systèmes d'étanchéité uniques
- > Meilleure visibilité grâce à la petite tête
- > Design économique pour un traitement efficace
- > Vitesses de rotation optimales pour un polissage/nettoyage atraumatique et efficace
- > Facilité d'entretien et hygiène parfaite
- > Thermodésinfectable et stérilisable



Pièces à main et contre-angles Proxeo

Plus d'informations
page 18

Les avantages en un clin d'œil

- > Réglable en continu
- > Larges faisceaux de lumière
- > Gamme complète d'inserts
- > Spray intégré
- > Hygiène irréprochable
- > Thermodésinfectable et stérilisable



Proxeo Détartreur à air

Plus d'informations
page 20

Détartreur piézoélectrique Tigon+




Le meilleur ami du patient

Simple, fiable et rassurant. Le détartreur piézoélectrique Tigon+ facilite considérablement votre travail quotidien. Vos patients restent sereins pendant toute la durée du traitement.



Confort d'un liquide à la bonne température

Même les dents et gencives sensibles ne sont plus agressées.

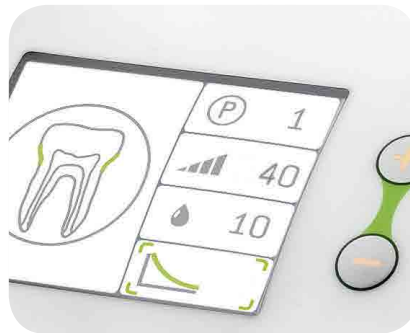

Traitement sûr grâce à trois niveaux de puissance prédéfinis

Power-Basic-Smooth – Vous réglez la puissance du détartreur selon vos besoins.



Cinq programmes réglables individuellement

La touche « navigation tooth » sur l'écran indique lequel des cinq programmes de traitement est en cours d'utilisation.



Pièce à main avec anneau de lumière à 5 LED

Pour un éclairage optimal.



Gamme d'inserts parfaitement adaptés

Pour la prophylaxie et la parodontologie, l'endodontie, l'implantologie et la restauration.



Commande au pied multifonction

Utilisation aisée pour que vous puissiez vous concentrer sur vos patients.

Détartreur piézoélectrique Tigon



La perfection en toute simplicité

Convivial, compact et facile à utiliser. Les nombreux avantages du Tigon vous séduisent, jour après jour.



Utilisation aisée

Puissance du détarteur et du débit du liquide de refroidissement réglable par simple pression.



Pièce à main avec anneau de lumière à 5 LED

Éclairage parfait et perception visuelle comme sous la lumière du jour.



Gamme d'inserts parfaitement adaptés

Pour la prophylaxie et la parodontologie, l'endodontie, l'implantologie et la restauration.



Réservoir de liquide de refroidissement de 400 ml

Graduation tous les 50 ml pour vous permettre de mélanger les liquides de rinçage directement dans le réservoir.



Plateau et support pour pièce à main

Supports thermodésinfectables et stérilisables pour vos instruments.




Pièce à main ergonomique

Pour travailler en toute sécurité sans se fatiguer.

Inserts piézo



Clé de changement d'insert

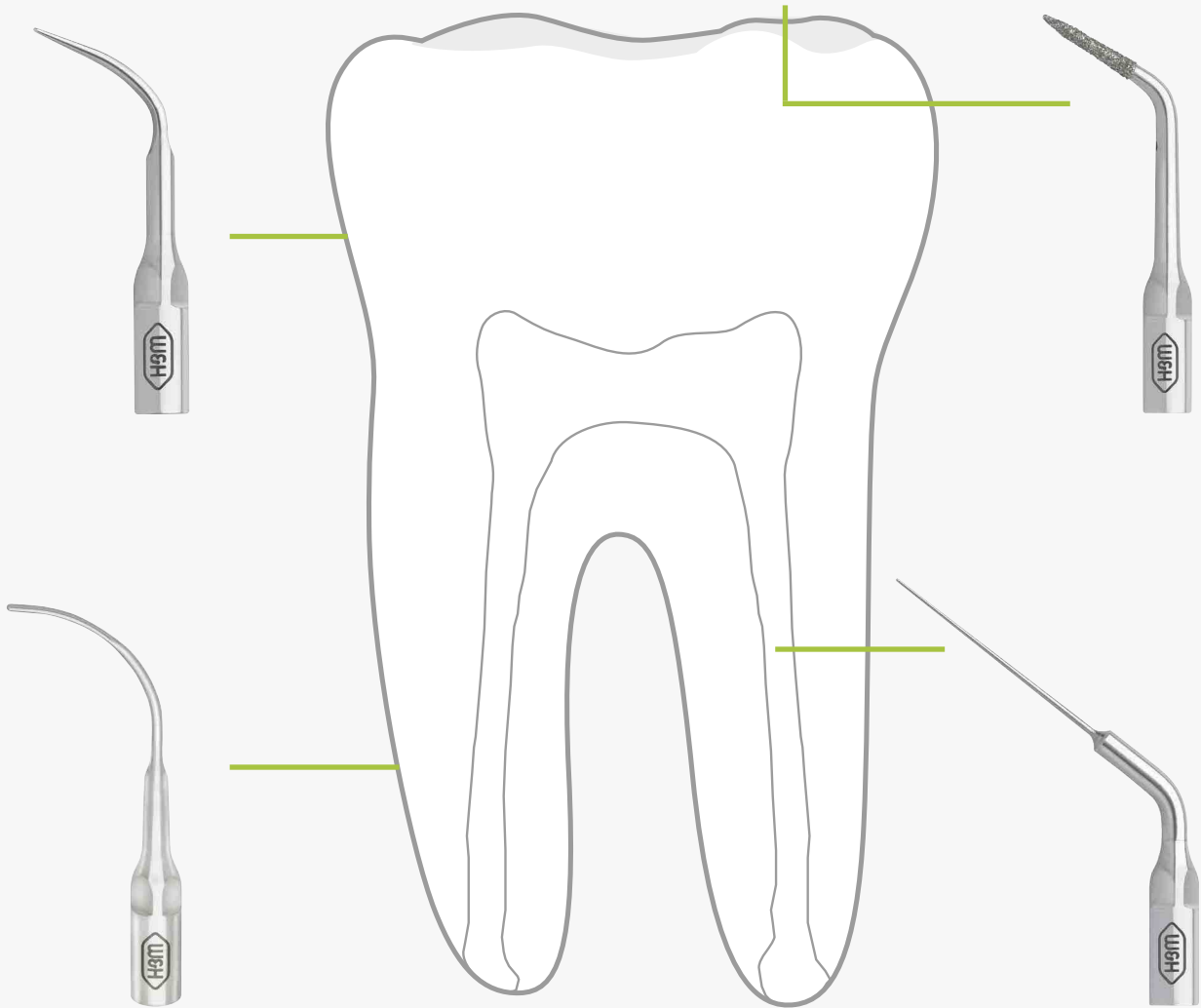

Restauration



Universel



Parodontologie



Endodontie

Compact, facile à utiliser et sûr

Système compact d'inserts, de qualité supérieure. Un système composé de 22 inserts universels et spéciaux, parfaitement adaptés aux exigences de chaque application et étape de traitement. Tous les inserts W&H sont thermodésinfectables et stérilisables.



Inserts universels et
insert Implant Clean
1U, 2U, 3U, 4U, 1I Implant



Inserts de parodontologie
1P, 3Pr/3PI, 4P, 5Pr/5PI, 5P



Inserts de restauration
1R, 2R, 3Rm, 3Rd



Inserts endo
1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E



Kit adaptateur W&H
Le kit adaptateur W&H vous donne la possibilité de nettoyer et désinfecter les inserts intérieurement et extérieurement en utilisant une procédure validée au thermodésinfecteur.

Pièces à main et contre-angles Proxeo



Pour un sourire éclatant

Compact et simple. Proxeo, le contre-angle pour le nettoyage, le polissage et la fluoruration. Le principal avantage est d'avoir une petite tête munie d'un système d'étanchéité spécial qui empêche la pénétration de la pâte de polissage.



Longévité et hygiène

Longue durée de vie grâce au système d'étanchéité spécial qui empêche la pénétration de pâte ou de particules de traitement.



Visibilité optimale

La petite tête de contre-angle plus petite offre une visibilité exceptionnelle sur les zones de traitement, même en zone distale.



Une incroyable flexibilité

Le contre-angle UNIVERSAL s'utilise avec toutes les cupules et brochettes screw-in et les adaptateurs snap-on.



Polyvalent et souple

Le système YOUNG est utilisable avec les cupules et brochettes screw-in. L'effet d'étanchéité est renouvelé à chaque changement de cupule et garantit une hygiène irréprochable.



Simplement rapide

Le contre-angle WP-66 M avec système de serrage à bouton-poussoir est compatible avec l'ensemble des cupules, brochettes et adaptateurs snap-on à mandrin de 2,35 mm.



Convivialité et hygiène optimale

La pièce à main pour tous les contre-angles à usage unique avec mandrin plastique, système Doriot. Après utilisation, il suffit de jeter le contre-angle.

Détartreur à air Proxeo



La prophylaxie a de la classe

Rapide, doux, puissant. Le détartreur à air comprimé avec spray intégré et deux faisceaux de lumière grand format est idéal pour éliminer mécaniquement la plaque, le tartre et nettoyer les surfaces radiculaires. Résultat : il améliore le bien-être et augmente le bien-être des patients avec des surfaces dentaires impeccablement entretenues.



Réglable en continu

La puissance peut être adaptée à l'application souhaitée à l'aide du régulateur de puissance.




Large faisceaux de lumière

Deux larges faisceaux de lumière éclairent parfaitement la zone de traitement.



Gamme d'inserts complète

Le détartreur et sa gamme d'inserts permettent d'obtenir des résultats optimaux.

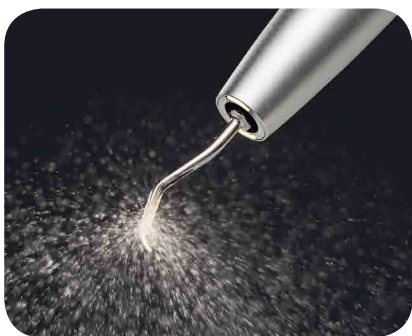

Spray intégré

Le spray intégré refroidit la zone de traitement en permanence tout en éliminant microparticules abrasées et les dépôts.



Hygiène irréprochable

Le nettoyage des instruments est particulièrement efficace grâce à leur surface lisse. Ils sont thermodésinfectables et stérilisables.



Kit adaptateur W&H

Le kit adaptateur W&H vous donne la possibilité de nettoyer et désinfecter les inserts intérieurement et extérieurement en utilisant une procédure validée au thermodésinfecteur.

Détartreur piézoélectrique Tigon+



Type :	PA-123 / PA-115
Tension secteur :	220 – 240 V / 110 – 130 V
Courant nominal :	0,1 – 1,6 A / 0,1 – 2,5 A
Variation de tension autorisée :	± 10%
Fréquence :	50 – 60 KHz
Puissance d'émission maxi vers la pièce à main avec charge (ultrasons) :	10 W
Longueur du cordon de la pièce à main :	1,8 m
Hauteur / largeur / profondeur :	178 x 276,5 x 300 mm
Commande au pied :	S-N1, C-NF
Poids :	3,9 kg

Détartreur piézoélectrique Tigon



Type :	PB-323 / PB-315
Tension secteur :	220 – 240 V / 110 – 130 V
Courant nominal :	0,1 – 0,8 A / 0,1 – 1,6 A
Variation de tension autorisée :	± 10%
Fréquence :	50 – 60 KHz
Puissance d'émission maxi vers la pièce à main avec charge (ultrasons) :	10 W
Longueur du cordon de la pièce à main :	1,8 m
Hauteur / largeur / profondeur :	178 x 276,5 x 300 mm
Utilisable avec commande au pied :	C-NF
Poids :	2,7 kg



Pièces à main et contre-angles Proxeo



Type :	WP-64 MU	WP-64 M	WP-66 M	HP-44 M
Rapport :	4:1			
Système d'accouplement :	ISO 3964 (DIN 13.940)			
Embouts utilisables :	Cupules, brochettes screw-in et adaptateurs snap-on (filetage 1-72 UNF 2A)	YOUNG Cupules et brochettes screw-in	Cupules, brochettes et adaptateurs snap-on avec mandrin de 2,35 mm	Contre-angles à usage unique avec mandrin plastique, système Doriot
Vitesse de rotation maxi du moteur :	10.000 tr/min			
Vitesse de rotation maximale pour les cupules et brochettes :	2.500 tr/min			
Vitesse de rotation recommandée pour les cupules et brochettes :	1.250 – 1.500 tr/min			

Détartreur à air Proxeo



Type :	ZA-55 L / ZA-55 LM / ZA-55 LS	ZA-55 / ZA-55 M	ZE-55 BC	ZE-55 RM
Lumière :	oui	non		non
Puissance réglable :	oui	non		non
Fréquence d'oscillation :	6 kHz			
Amplitude d'oscillation :	< 200 µm			
Pression de fonctionnement :	3 ±0,3 bar / 3 ^{+0,6} _{-0,3} bar / 3 ±0,3 bar	3 ±0,3 bar / 3 ^{+0,6} _{-0,3} bar		2,2 – 2,5 bar
Quantité de liquide de refroidissement :	30 – 60 ml/min		au moins 30 ml/min.	
Raccord :	RQ-24, RQ-34 / RM-34 LED, Multiflex®* / Sirona®*	RQ-3, RQ-4, RQ-14 / Multiflex®*	 Raccord fixe 	
Inserts W&H utilisables :	1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2API, 2APr, 3AP Les inserts des autres fabricants doivent être approuvés pour le détartreur à air W&H.			
Contenu de l'emballage :	inserts 1AU, 2AU, 3AU, 1AP, clé de changement d'insert		2x inserts 1AU	
Thermodésinfectables :	oui		non	

* Multiflex® et Sirona® sont des marques de parties tierces non affiliées à W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.

Information réglementaire :

Dispositifs Médicaux Classe 2a / CE 0297 / DQS

Réservés aux professionnels de la médecine dentaire, non remboursés par les organismes d'assurance maladie.

Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation ou sur l'étiquetage du produit.

Prophylaxie et parodontologie

Photos non contractuelles. Le matériel supplémentaire et les accessoires illustrés ne font pas partie de la livraison.

Scannez le code QR avec
votre téléphone portable
pour en savoir plus sur
nos produits



Fabricant :

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribution :

W&H France
4 rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim, France
t. + 33 388 773 600
f. + 33 388 773 601
commercial.fr@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz
t + 41 43 4978484
f + 41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com