Restauration et soins prothétiques



he independent: Alegra.





Préparation optimale

Durable. Compact. Précis. Avec les contre-angles Alegra de W&H, vous traitez vos patients avec la plus grande précision, en toute sécurité.



Préparation efficace et précise, finition dosée

Des résultats de préparation parfaits pour votre restauration élaborée par CAO/FAO avec le contre-angle Alegra WE-99 LED G.



Compact et performant

L'association du moteur électrique – court et léger – et des contre-angles Alegra, permet de travailler de manière ergonomique, sans aucune fatigue.



Moteur électrique EM-E6 + kit commande de table EM-E6 TP + contre-angle LED G

Le moteur électrique sans charbon en version de table est prêt à l'emploi, car aucune transformation ni intervention dans la commande de l'unit dentaire ne sont nécessaires. La commande de table se raccorde facilement au cordon de la turbine et est immédiatement prête à l'emploi, tandis que l'alimentation électrique est fournie par un bloc d'alimentation externe.

LED+ en qualité lumière du jour pour tous

Moteur actif = LED+ allumée. Un générateur intégré alimente les LED sur le même principe qu'une dynamo de vélo. Ainsi, les contre-angles LED+ Alegra offrent un éclairage de qualité lumière du jour, quel que soit l'entraînement utilisé.



Fiabilité garantie

Des contre-angles made in Austria : durables, résistants et précis.



Indice de rendu de couleur élevé (IRC)

Le secret réside dans le contraste : l'IRC supérieur à 90 de l'Alegra permet d'obtenir un rendu naturel des nuances de rouge et un fort contraste des couleurs.




Travail optimal avec les LED+

Lumière du jour dans la cavité buccale : grâce au générateur LED et à la position optimale de la sortie de lumière.



Une innovation étonnante

Un générateur LED intégré alimente les LED sur le même principe qu'une dynamo de vélo.

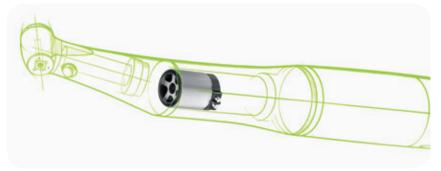


Indépendance totale

La qualité lumière du jour indépendamment de votre unit et sans investissement supplémentaire grâce au générateur LED intégré.

Caractéristiques techniques

Photos non contractuelles. Le matériel supplémentaire et les accessoires illustrés ne font pas partie de la livraison.

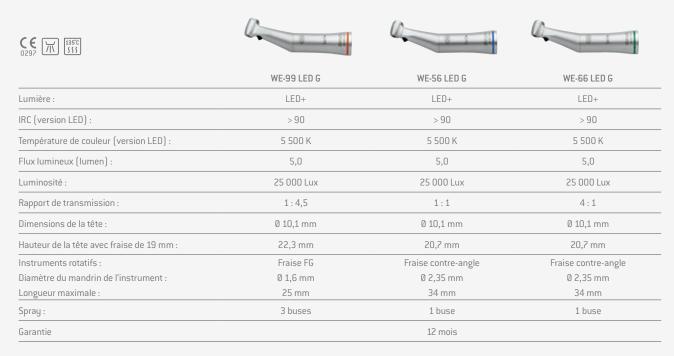

Connexion ISO pour les moteurs électriques et les moteurs à air.

Information réglementaire : Dispositif Médical Classe 2a / CE 0297 / DQS

Réservé aux professionnels de la médecine dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation ou sur l'étiquetage du produit.

Fabricant:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1 5111 Bürmoos, Austria t +43 6274 6236-0 f +43 6274 6236-55 office@wh.com wh.com

Distribution:

W&H France
4 rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim, France
t. + 33 388 773 600
f. + 33 388 773 601
commercial.fr@wh.com
wh.com

W&H CH-AG Industriepark 9 8610 Uster, Schweiz t +41434978484 f +41434978488 info.ch@wh.com wh.com